



DEZINFEKČNÁ ČISTIACA PENA PRE ZDRAVOTNÍCKE A CHIRURGICKÉ NÁSTROJE

Aniosyme Prime

DEZINFEKČNÁ ČISTIACA PENA PRE ZDRAVOTNÍCKE A CHIRURGICKÉ NÁSTROJE NA PRED ČISTENIE

- Zloženie kombinuje dva patenty účinnosti
- Zabraňuje zaschnutiu znečistených plôch
- Antimikrobiálna účinnosť od 15 min
- Hustá pena umožňuje rovnomerné pokrytie nástrojov
- Široká kompatibilita



ECOLAB®

www.ecolab.sk

Aniosyme Prime


Dezinfekčná čistiaca pena pre zdravotnícke a chirurgické nástroje na pred čistenie

OBLASŤ POUŽITIA


Predčistiaca dezinfekčná pena na priame použitie pre optimálne odstraňovanie nečistôt na nástrojoch s dlhším odstupom (až do 72 h) alebo pred ich automatickým spracovaním.

Zabraňuje zaschnutiu nečistôt a umožňuje jednoduchšie predčistenie s dobrým čistiacim efektom. Hustá pena garantuje pokrytie celého povrchu nástrojov. Aniosyme Prime je kompatibilný so širokou škálou materiálov. Nie je vhodný na nástroje vyrobené zo zinku alebo zo železa bez antikoroziívnych úprav.


NÁVOD NA POUŽITIE

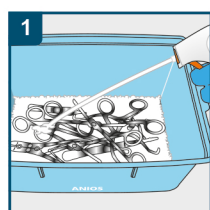

1. Nastriekajte penu Aniosyme Prime na dno dezinfekčnej nádoby a vložte do nej nástroje.

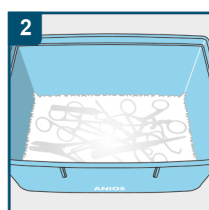

2. Prekryte nástroje penou. Minimálny čas expozície v nádobe: 15 minút. Pre tuberkulocídnu účinnosť je potrebný čas expozície 30 minút.

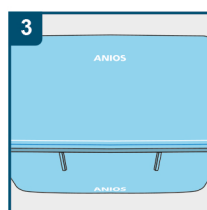

3. Prikryte dezinfekčnú nádobu vekom.



4. Ošetrovaný zdravotnícky prostriedok dôkladne opláchnite pitnou vodou, aby ste odstránili zvyšky produktu a organického znečistenia pred mechanickým alebo automatickým spracovaním.

MIKROBIOLOGICKÉ VLASTNOSTI

ÚČINNOSŤ	EXPOZIČNÝ ČAS
Baktericídna účinnosť Podľa EN 13727 a EN 14561, podmienky s vyššou záťažou	15 min
Účinnosť proti kvasinkám Podľa EN 13624 a EN 14562, podmienky s vyššou záťažou	15 min
Tuberkulocídna účinnosť Podľa EN 14348 a EN 14563, podmienky s vyššou záťažou	30 min
Mykobaktericídna účinnosť Podľa EN 14348 a EN 14563, podmienky s vyššou záťažou	60 min
Účinný proti obaleným vírusom Podľa EN 14476 / EN 17111, podmienky s vyššou záťažou	15 min

BALENIE A INFORMÁCIA PRE OBJEDNÁVANIE

PRODUKT	BALENIE	OBJEDNÁVACÍ KÓD
Aniosyme Prime	12 x 750 ml fľaše	3102830



LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribútor pre SR:
ECOLAB s.r.o.
Voctářova 2449/5, Libeň
180 00 Praha 8
Česká republika

OBLASŤ POUŽITIA

Na predčistenie chirurgických nástrojov v pene: pre transport nástrojov v suchom stave alebo pre skladovanie znečistených nástrojov pred manuálnym alebo automatickým spracovaním. Uchováva adekvátnu úroveň vlhkosti, aby sa predišlo zaschnutiu krvi alebo iného organického materiálu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Prípravok na priame použitie

1. Nastriekajte penu Aniosyme Prime na dno dezinfekčnej nádoby a vložte do nej nástroje.
2. Prekryte nástroje penou. Minimálny čas expozície v nádobe: 15 minút. Pre tuberkulocídnu účinnosť je potrebný čas expozície 30 minút.
3. Prikryte dezinfekčnú nádobu vekom.
4. Ošetrovaný zdravotnícky prostriedok dôkladne opláchnite pitnou vodou, aby ste odstránili zvyšky produktu a organického znečistenia pred mechanickým alebo automatickým spracovaním.

Nevhodný pre nástroje vyrobené zo zinku alebo zo železa.

ZLOŽENIE

Kvartérny uhličitán amónny, neiónové povrchovo aktívne látky, enzýmový komplex (proteáza, lipáza a amyláza), sekvestračné činidlo, pomocné látky.

SKLADOVANIE

Nebezpečný - berte do úvahy bezpečnostné pokyny (vypracované v súlade s európskymi pravidlami týkajúcimi sa klasifikácie a označovania chemických prípravkov). Skladujte pri teplotách +5°C až +25°C.

CERTIFIKÁTY

Zdravotnícka pomôcka. Plná antimikrobiálna aktivita produktu Aniosyme Prime je súčasťou vedeckej dokumentácie.

POUŽÍVAJTE ZDRAVOTNÍCKU POMÔCKU BEZPEČNE

Pred použitím si pozorne prečítajte etiketu a informácie o výrobku.



LEN PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE



www.ecolab.sk